



# ООО «ТД Сибагроприбор»

НН 5433167778 КПП 543301001 Индекс 630501, Новосибирской обл., Новосибирский р-н, р. п. Краснообск, ул. Восточная, д.22, ком 5-6, а/я 391 № 40702810700430011347, Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ, (ПАО) г. Москва, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411 т/факс: +7(383) 217-40-04, 348-03-92; e-mail: td@sibagropribor.ru, www.sibagropribor.ru

## Тесты PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (4 in 1) JC0313

Определение остаточного количества неомицина, канамицина, гентамицина, спектиномицина в молоке, молочной сыворотке.

Продукция PIONEER MEIZHENG BIO-TECH имеет сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 033/2013 Методика аттестована ФБУ «Ростест-Москва»

Проведена валидация в ведущих отраслевых институтах РФ и Европы

Время анализа — 7 минут

Температура инкубации 40 С °

В упаковке 96 тестов



## Достоинства экспресс-тестов Pioneer Meizheng Bio -Tech:

	<b>Качество</b> Качество продукции выше цены
	<b>Сертификация</b> Гигиенические сертификаты и технические инструкции на всю продукцию
	<b>Уникальность</b> Большинство тестов имеют уникальную рецептуру и свойства

## Принцип работы тестов


В наборе реагентов используется иммунохроматографический метод анализа с использованием частиц коллоидного золота. Проба добавляется в лунку с антителами, если в пробе присутствуют антибиотики, они будут связываться с антителами, предотвращая, таким образом, последующее связывание антител с антигенами, нанесенными на нитроцеллюлозную мембрану тест-полоски. Результатом реакции является окрашивание полосок, что и учитывается впоследствии.

## Последовательность проведения анализа:

<b>1</b>	<b>Пробоподготовка образцов молока и молочной сыворотки:</b> Сухое молоко, сухая молочная сыворотка: в подходящей колбе растворите пробу теплой дистиллированной водой (согласно действующей нормативной документации), тщательно перемешайте. Молоко, восстановленное сухое молоко, восстановленная сухая сыворотка: пробы должны быть жидкими и однородными. В пробах не должно быть сгустков и фаз разделения продукта. Температура пробы должна быть не ниже 4 о С, не замороженной и не нагретой. Перед испытанием тщательно перемешайте пробу.
<b>2</b>	<b>Подготовка инкубатора типа Mini-T:</b> Анализ может проводиться как с использованием инкубатора, так и без. При использовании инкубатора сделайте следующее: поставьте инкубатор на рабочий стол с плоской поверхностью. Блок питания подключите к инкубатору, а затем вставьте в розетку с напряжением 220В. Установите переключатель в рабочее положение. Далее установите рабочую температуру 40 ° С и подождите, когда прибор нагреется. После того как инкубатор нагреется до рабочей температуры, можно помещать лунку с пробой в соответствующее отверстие.
<b>3</b>	<b>Проведение самоконтроля тест-набора:</b> Перед началом работы с пробами следует провести самодиагностику тест-набора. Для этого следует использовать отрицательные и положительные контрольные образцы, входящие в состав набора. Разрешается дальнейшая работа с набором, с подтвержденными характеристиками и пределами обнаружения антибиотиков, в случае получения полностью отрицательного результата при анализе отрицательного контрольного образца, и полностью положительного результата при анализе положительного контрольного образца.
<b>4</b>	<b>Приготовление отрицательного контрольного образца:</b> Добавьте во флакон, содержащий отрицательный контрольный образец 2 мл дистиллированной или деионизированной воды и как следует перемешайте. Хранить приготовленный отрицательный стандарт следует при температуре 2-8 °С не более 24 часов. Замороженный отрицательный образец при температуре равной или ниже – 16 о С следует хранить в холодильнике не более 30 дней. Перед применением отрицательный контроль следует довести до комнатной температуры тщательно перемешать. Далее следуйте процедуре анализа молока и молочной сыворотки (читай далее).
<b>5</b>	<b>Приготовление положительного контрольного образца:</b> Добавьте 200 мкл восстановленного отрицательного контрольного образца в лунку с реагентом, содержащую положительный контрольный образец. С помощью пипетки перемешайте их 10 раз.

	<p>После перемешивания смесь пробы и реагент из лунки должны иметь однородную структуру. Поместите лунку с розовым реагентом, содержащим антитела, в предварительно нагретый до 40 ° С инкубатор или в планшет для лунок. Отберите пипеткой 200 мкл полученного положительного контрольного образца и перенесите в лунку с розовым реагентом, используя пипетку перемешайте их 10 раз до равномерного розового окрашивания. Инкубируйте смесь в течение 3-х минут. Затем поместите тест-полоску из набора в лунку с образцом и инкубируйте ещё 7 минут.</p> <p>После инкубирования, извлеките тест-полоску из лунки с образцом и интерпретируйте результат в течение 3-х минут.</p>
6	<p><b>Процедура анализа молока и молочной сыворотки:</b></p> <p>Прочитайте руководство по эксплуатации перед анализом. Определите, какое количество тестов Вам необходимо, извлеките необходимое количество тестов из холодильника. Реагенты набора должны иметь комнатную температуру. Реагенты и тест полоски из открытых туб желательно использовать в течение 24 часов, с момента извлечения из холодильника, во избежание искажения результатов. Все неиспользуемые реагенты набора необходимо убрать в холодильник. Избегать попадания прямых солнечных лучей и излишней влаги на реагенты. Реагент в лунке специально высушивают. Не думайте, что он испорчен.</p>
7	<p><b>При использовании инкубатора</b>, поместите лунку с пробой в предварительно нагретый до 40 ° С инкубатор, с помощью пипетки отберите пробу молока либо молочной сыворотки объемом 200 мкл и перенесите в лунку с реагентом из набора. Тщательно перемешайте пробу с реагентом десятикратным набором и сливом жидкости с помощью пипетки в лунке до равномерного розового окрашивания и инкубируйте смесь в течение 3-х минут. Затем поместите тест-полоску из набора в лунку с реагентом и пробой и инкубируйте в инкубаторе ещё 7 минут при 40 ° С.</p>
8	<p><b>При отсутствии инкубатора</b>, анализ можно проводить в закрытом помещении при температуре 16-25 ° С. Поместите лунку с пробой в планшет для лунок, с помощью пипетки отберите пробу молока либо молочной сыворотки объемом 200 мкл и перенесите в лунку с реагентом из набора. Тщательно перемешайте пробу с реагентом десятикратным набором и сливом жидкости с помощью пипетки в лунке до равномерного розового окрашивания инкубируйте смесь в 3-х минут. Затем поместите тест-полоску из набора в лунку с реагентом и пробой и инкубируйте в инкубаторе ещё 7 минут. После инкубирования, извлеките тест-полоску из лунки с реагентом и пробой и интерпретируйте результат в течение 3-х минут. Для сохранения результата удалите оба фильтра с обоих концов тест-полоски</p>

## Визуальная интерпретация результата:

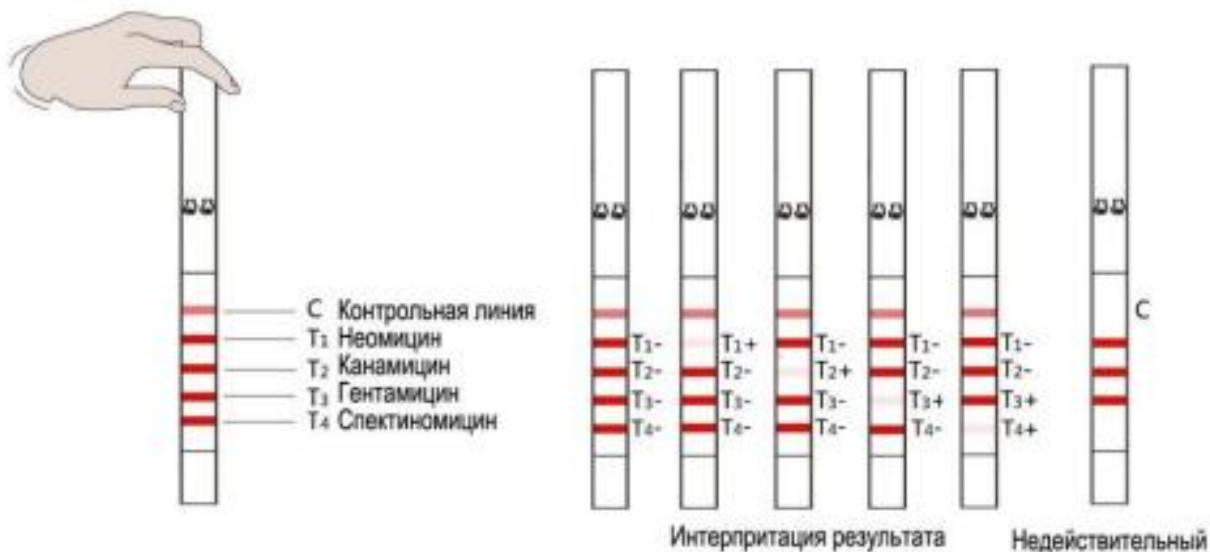

**Отрицательный результат (-):** контрольная линия (С) окрашена красным; соответствующая своему антибиотику тестовая линия (Т1 ... Т4) окрашена красным ярче контрольной линии (С) или имеет одинаковую интенсивность окрашивания с контрольной линей (С). Это означает, что образец не содержит антибиотики вообще, или содержит их меньше предела обнаружения тест-набора (см. Таблицу 1).

**Положительный результат (+):** контрольная линия (С) окрашена красным; соответствующая своему антибиотику тестовая линия (Т1 ... Т4) отсутствует или имеет более слабую интенсивность окрашивания по сравнению с контрольной линией (С). Это означает, что образец содержит соответствующий своей полосе антибиотик больше предела обнаружения тест-набора (см. Таблицу 1).

**Недействительный результат:** контрольная линия (С) не проявила вообще. Это означает, что анализ проведен не правильно, либо тест-полоска испортилась. Тест должен быть проведен повторно.

## Простое обучение работе

- Изучите прилагаемую к тестам инструкцию
- [ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ](#) позволит быстро освоить работу

## Состав набора:

**В набор входит все необходимое для 96 определений:**

- 12 туб, каждая из которых содержит 1 стрип с 8 лунками с реагентом, содержащим антитела, и 8 тест - полосками;
- 100 одноразовых пипеток Пастера либо 100 наконечников (пипет-дозатор на 200 мкл, опция);
- Инструкция;
- 8 лунок с реагентом для проведения контроля – Положительный стандарт (концентрация антибиотика указывается на упаковке позитивного контроля и в качественном удостоверении, идущем на каждую партию тест-наборов);

- флакон с реагентом для проведения отрицательного контроля (не содержит антибиотиков);
- 1 планшет для лунок;
- карточки с QR-кодами для калибровки считывающего устройства BMZ6000 (см. инструкцию к считывающему устройству).

**Предел обнаружения тест-набора:**

Аминогликозиды	Предел обнаружения ppb (мкг/кг)	Аминогликозиды	Предел обнаружения ppb (мкг/кг)
Неомицин	5	Гентамицин	6
Канамицин	5	Спектиномицин	6

**Условия хранения:**

Тест - наборы должны храниться при температуре 2-8 °C.

Не замораживать! Срок хранения: 12 месяцев.

Номер партии и срок годности указаны на упаковке.

**Рекомендуем дополнительно заказать:**

- [Оборудование для санитарного контроля и гигиены на производстве](#)
- [pH-метр \(для контроля кислотности молока\)](#)
- [Термометр \(электронные, карманные для молока, сыра\)](#)
- [Тесты для определения антибиотиков в молоке](#)
- [Набор для пробоотбора молока \(мутовки, пробоотборники, кружки\)](#)
- [Весы лабораторные и аналитические](#)

**Надеемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество!!!**

ООО «ТД Сибагроприбор»

Ваш менеджер

(383) 217-40-04, 348-03-92

[td@sibagropribor.ru](mailto:td@sibagropribor.ru)

[www.sibagropribor.ru](http://www.sibagropribor.ru)